

VIRTUEDX NAT Preservative Medium

(Kemenkes RI AKD 10302520169 — TKDN 40,37%)

Dirancang untuk mempertahankan kondisi sel dari spesimen usap serviks.

• *Spesifikasi Reagen*

Nomor Ref	Nama Produk	Spesifikasi
1900009926	VIRTUEDX NAT Preservative Medium	Preservative Medium dengan filter 15 ml x 25 vials/package
1900001026	VIRTUEDX NAT Preservative Medium	Preservative Medium dengan filter 15 ml x 24 vials/package
1900000826	VIRTUEDX NAT Preservative Medium	Preservative Medium dengan filter 15 ml x 1 vial/package

• *Penyimpanan Reagen*

Kondisi Penyimpanan	Suhu Penyimpanan	Waktu Penyimpanan
Belum dibuka	15-30°C	Hingga tanggal kedaluwarsa
Sudah ditambah sampel	2-8°C	12 minggu
Sudah ditambah sampel	Suhu ruang	7 hari

Keunggulan Preservative dengan Filter

- Menyaring partikel besar & debris
- Meningkatkan kualitas ekstraksi DNA
- Menjaga stabilitas & integritas sampel
- Mempermudah proses laboratorium



Diproduksi oleh:
PT. VIRTUE DIAGNOSTICS INDONESIA


Didistribusikan oleh:
PT DARMA LABORA INDONESIA

Kawasan Industri Jababeka 7, Kav. B3B, Cikarang Utara, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17534

☎ 021 38725029 📧 customerservice.id@virtuedx.com 🌐 virtuedx.co.id



SOLUSI LENGKAP PEMERIKSAAN HPV DNA

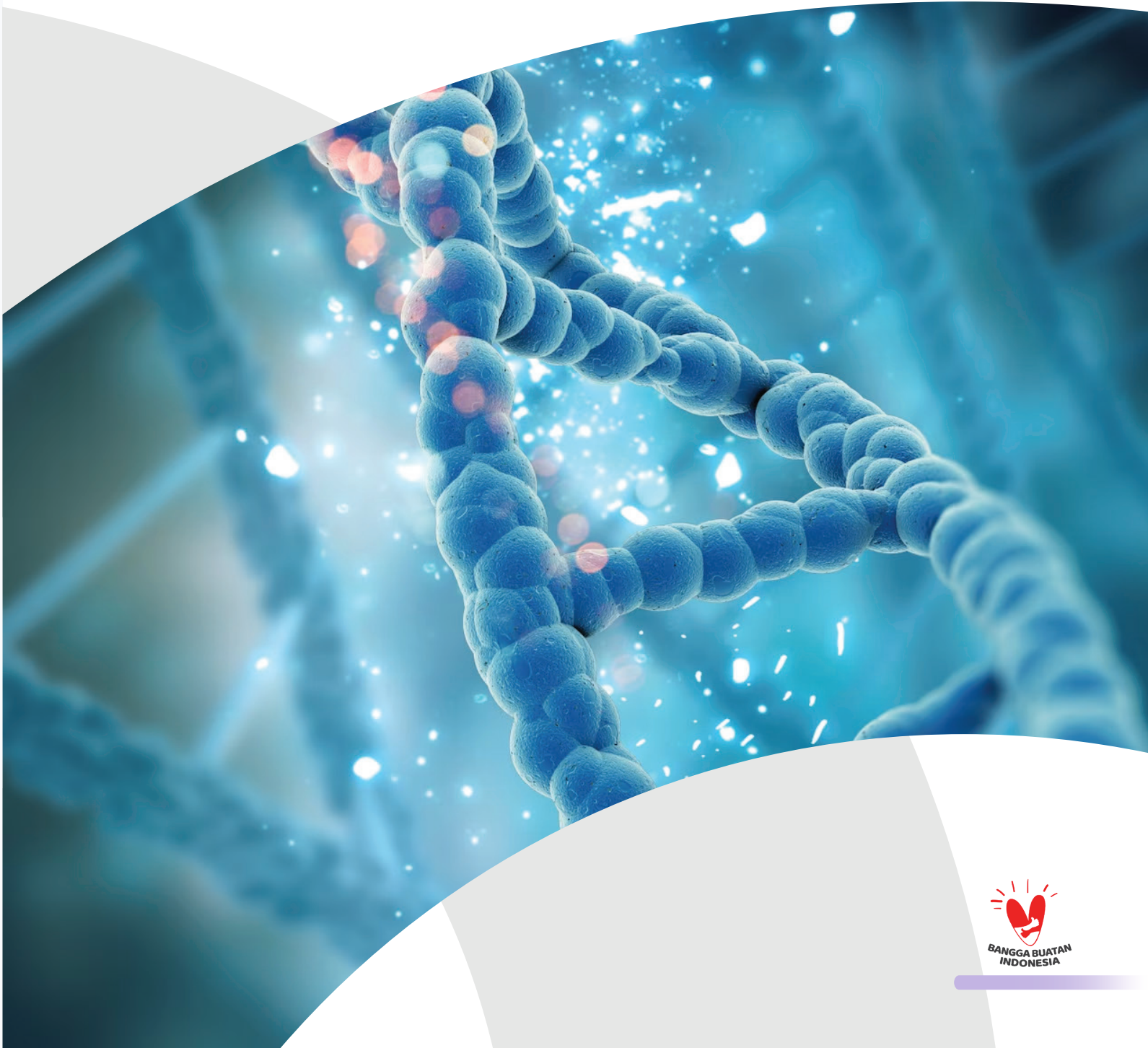

VIRTUEDX NAT High-Risk HPV Kit

(Kemenkes RI AKD 20306520146 — TKDN 43,31%)

Digunakan untuk mendeteksi Human Papillomavirus (HPV) risiko tinggi pada sampel sel serviks secara cepat, sensitif, dan andal dengan teknologi real-time PCR. Kit ini mampu mengidentifikasi 14 tipe HPV risiko tinggi dalam satu kali pemeriksaan, termasuk deteksi spesifik untuk HPV tipe 16 dan 18 serta deteksi simultan (pooled) untuk 12 tipe risiko tinggi lainnya. (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, dan 68)

Spesifikasi Reagen

Nomor Ref	Nama Produk	Spesifikasi
1900000426	VIRTUEDX NAT High-Risk HPV Kit	48 Tes / Kit
1900076926	VIRTUEDX NAT High-Risk HPV Kit	96 Tes / Kit

Komponen Reagen

Nama Komponen	Ukuran (48 Tes)	Ukuran (96 Tes)	Keterangan
HPV M1	1 x 288 µL/tube x 1	1 x 288 µL/tube x 1	Taq Polymerase dan Buffer
HPV M2	1 x 288 µL/tube x 1	1 x 288 µL/tube x 1	Campuran Primer dan Probe
HPV PC	1 x 80 µL/tube x 1	1 x 80 µL/tube x 1	Kontrol Positif
HPV NC	1 x 80 µL/tube x 1	1 x 80 µL/tube x 1	Kontrol Negatif

Penyimpanan Reagen

Kondisi Penyimpanan	Suhu Penyimpanan	Waktu Penyimpanan
Belum dibuka	2-8°C	Hingga tanggal kedaluwarsa
Setelah dibuka	2-8°C	3 bulan

- Sampel : Spesimen usap serviks

Limit of Detection : 3.2 – 5 salinan/reaksi



VIRTUEDX NAT Lysis Buffer (Ekstraksi Manual)

(Kemenkes RI AKD 10204520064 — TKDN 45,88%)

Sistem ekstraksi manual yang digunakan untuk melisis sel yang diambil dari spesimen serviks secara langsung.

Spesifikasi Reagen

Nomor Ref	Nama Produk	Spesifikasi
1900000526	VIRTUEDX NAT Lysis Buffer	48 Tes / Kit

Komponen Reagen

Nama Komponen	Ukuran (48 Tes)	Keterangan
Lysis Buffer	2.16 mL/botol x 1	Direct Lysis Buffer
Prot K	240 µL/tabung x 1	Proteinase K

Penyimpanan Reagen

Kondisi Penyimpanan	Suhu Penyimpanan	Waktu Penyimpanan
Belum dibuka	2-8°C	Hingga tanggal kedaluwarsa
Setelah dibuka	2-8°C	3 bulan

VIRTUEDX NAT Extraction Kit

(Kemenkes RI AKD 10204520312 — TKDN 42,41%)

Sistem ekstraksi dan purifikasi DNA yang dirancang khusus untuk sel yang dikumpulkan dari spesimen usap serviks. Kit ini digunakan bersama dengan instrumen ekstraksi otomatis VERCENTRA NAT-32 Automatic Nucleic Acid Extraction Instrument atau instrumen setara yang sesuai secara teknis.

Spesifikasi Reagen

Nomor Ref	Nama Produk	Spesifikasi
1900000526	VIRTUEDX NAT Extraction Kit	48 Tes / Kit

Komponen Reagen

Nama Komponen	Jumlah	Keterangan
Virtue DX NAT Extraction Kit	3	Satu kemasan 96 – well plate terdapat reagen untuk purifikasi asam nukleat dari 16 spesimen
Magnetic Rod Sleeve	3	Satu kemasan magnetic rod sleeve berisi

Penyimpanan Reagen

Kondisi Penyimpanan	Suhu Penyimpanan	Waktu Penyimpanan
Belum dibuka	15-30°C	Hingga tanggal kedaluwarsa